

Дорожный массажер
с акупунктурой
RelaxTime [Время отдыха]

SF-305



Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон

SOFO[®]
Enjoy Future Comfortably

Благодарим Вас за покупку продукции SOFO!
Надеемся, она станет для Вас верным помощником в заботе о своем здоровье и своих близких. Она принесет Вам наслаждение от комфортного массажа и подарит счастье здоровой жизни. Для безопасного, точного и удобного использования нашего продукта, пожалуйста, прочтите инструкцию перед этим.

Содержание:

Общие указания, спецификация.....	3
Устройство.....	4
Использование.....	5
Акуунктура.....	5
Уход, решение проблем.....	8
О SOFO.....	9
Гарантийные обязательства.....	10

Адреса

Адрес завода-изготовителя:

GUANGDONG SOFO ELECTRONICS INDUSTRIAL CO., LTD

Tel: +86-20-36906091

Address: 7th floor, East Tower Golden Building, No.47 Gongyi Rd., Xinhua Town, Huadu District, Guangzhou City, China.

Официальный представитель в России:

ООО «Торговый Дом «Кудесник» - оптовые поставки

8-800-200-383-2

Адрес: 630055, Новосибирск, ул. Иванова, оф. 136
тел.(383)332-46-93,(383)207-88-38

Интернет-магазин: www.kudesnik54.ru

Оф.сайт: www.tdkd.ru

e-mail: info@tdkd.ru

кудесник

Общие указания

- 1 . Массажер использует 2шт батареек AAA , пожалуйста, установите батареи перед использованием (правильно установите!).
- 2 . Этот массажер не рекомендован для лиц с заболеваниями сердца, костей, остеопорозом, при беременности и месячных.
- 3 . Время массажа не должно превышать 10 минут.
- 4 . Не используйте сразу после еды , обильного питья и/или после физической нагрузки .
- 5 . Зуд под кожей в начале использования является нормальным явлением - не беспокойтесь.
- 6 . Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно - у него хорошая гарантия.
- 7 . Пожалуйста, не используйте массажер во влажной среде, например: в ванной, с пеной, мылом или маслами. Прибор не ГЕРМЕТИЧЕН. Поломка с результате попадания воды лишает гарантии.
- 8 . Предохраняйте прибор от перепадов напряжения: после длительного нахождения на морозе подождите до 2 часов в тепел перед началом использования: во избежание конденсата и короткого замыкания.
- 9 . Пожалуйста, не осталяйте массажер рядом с источниками тепла, на солнце.
- 10 . Вынимайте батарейки, если прибор длительно не используется: батарейки могут окислиться, вытечь и разрушить внутренности массажера..
- 11 . Пожалуйста, не используйте изделие при температуре выше 40 град.С .

Спецификация


Модель: SF-305

Номинальное напряжение: DC 3V две батарейки AAA

Номинальная мощность: 1.5W


Номинальное время: 10 минут

Устройство, наименование частей

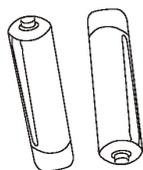


Работает от двух батареек AAA “мизинчикового” размера


Подготовка к работе

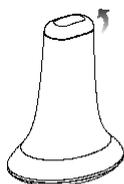

Поверните крышку против часовой стрелки на 2 часа

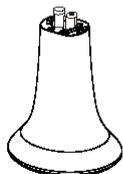

Установите батарейки правильно

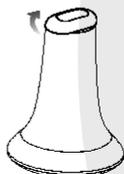

Закройте отсек повернув крышку

Сначала необходимо вставить батарейки как показано на рисунке: откройте отсек батарей легко повернув крышку на 2 часа против часовой стрелки.

Установите батарейки согласно полярности на картинке.


Закройте крышку не применяя излишней силы.

Массажер готов к использованию.

Использование

Этот массажер не имеет переключателя, поэтому взяв массажер, надавите на него и начинайте массажировать. Давите на него все время массажа.

1. Этот массажер очень удобно брать с собой куда угодно, поскольку он имеет 2 батарейки.
2. Его можно свободно использовать как угодно: сидя, стоя, лежа.
3. Чем сильнее сдавливаешь массажер, тем сильнее массаж, также можно массажировать взад и вперед.

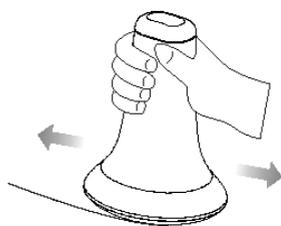


Двигайте, продолжая надавливать

Акупунктура

Крышка массажера покрыта мягким пластиком и является подходящим инструментом для акупунктуры:


1. Переверните массажер, разместив узкую часть на биологически активной точке (БАТ).
2. Нажимайте на широкую часть массажера для включения массажера и создания воздействия на БАТ.
3. Прекратите воздействие через рекомендованное время (обычно от 2 до 5 минут.).

Акупунктура, примеры использования

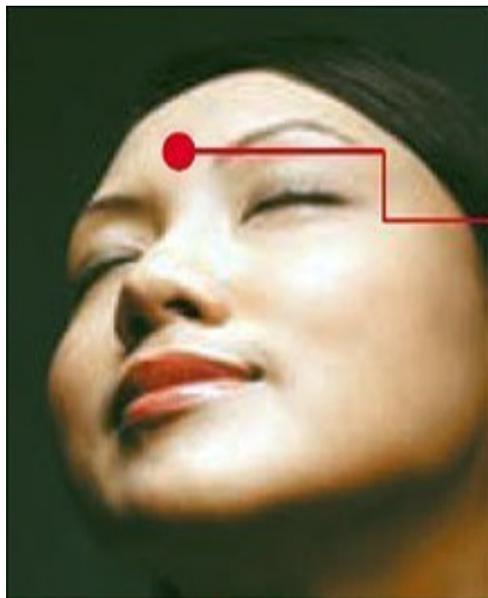

Точка 1. Положение: во впадинах на стыке переносицы и линии бровей.

Действие: снимает боль в глазах, головные боли, усталость глаз, помогает при сенной лихорадке и болях в полости носа.

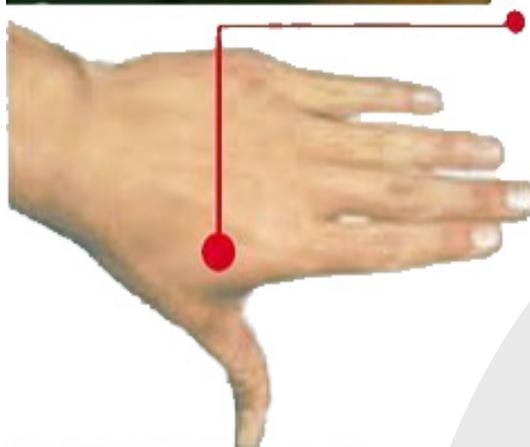

Точка 2. Положение: на выпуклости между большим и указательным пальцами, в верхней части мышцы, которая выступает при соединении большого и указательного пальцев.


Действие: снимает боли в передней части головы, зубную боль, боль в плечах и боли при родах. Предостережение: запрещается использование этой точки беременным женщинам.



Точка 3. Положение: на верхней части стопы, во впадине между большим и вторым пальцами ноги.

Действие: снимает боли в ступнях, головные боли, напряжение в глазах, помогает при аллергии, артрите и в состоянии похмелья.

Акупунктура, схема точек

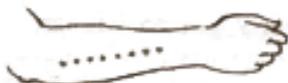

ЛЕЧЕНИЕ
ПРОСТУДЫ



ЛЕЧЕНИЕ НЕРВ-
НОГО СТРЕССА



ЛЕЧЕНИЕ
ГАЙМОРИТА



ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИИ



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
НАДПОЧЕЧНИКИ



ТОЧКИ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ПРИ
БОЛЯХ В СЕРДЦЕ



СНЯТИЕ ПРИСТУПА
СТЕНОКАРДИИ



СНЯТИЕ ПОВЫШЕННОЙ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ



Уход

1. Извлеките батареи перед очисткой массажера.
2. Пожалуйста, не используйте бензин, растворители и другие агрессивные жидкости для очистки.
3. Пожалуйста, не используйте воду для очистки изделия.
4. Пожалуйста, выньте батареи, если продукт не используется длительное время, во избежание повреждения массажера из-за утечки электролита.
5. Храните массажер в сухом, защищенном от пыли месте.
6. Пожалуйста, не оставляйте его рядом с нагревательными элементами или на прямом солнечном свете.

Решения проблем

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Нет вибрации	<ol style="list-style-type: none">1. Неверно установлены батарейки.2. Батарейки «сдохли».3. Нажатия недостаточно для включения массажера	<ol style="list-style-type: none">1. Перепроверьте установку батареек и закрытие крышки.2. Если батарейки стоят давно, попробуйте их заменить.3. Попробуйте двумя руками.
Вибрация ослаблена	Возможно, батарейки разрядились	Замените батарейки

Любые другие проблемы решаются при обращении в сервисный центр SOFO или через уполномоченных дистрибьюторов



SOFO Group была основана в 1997 году, и сразу занималась товарами, относящимися к роскошным массажным креслам, массажерам и фитнес-оборудованию более 100 наименований.

За 14 лет устойчивого развития, **SOFO** стала инновационной, и постоянно развивается, базируясь на солидном опыте основной команды,

мировой конъюнктуры, Hi-Tech технологиях, независимых патентах и других преимуществах длительной специализации в одной сфере.

Таким образом, мы постепенно формируем комплексную группу производственных предприятий, в содружестве с R&D, тестированием, отделом маркетинга и логистического распределения.

SOFO Group всегда стремилась в работе к оказанию «высококачественных услуг сообществу владельцев её продукции».

У нас есть 1500 сотрудников, 50 инженеров, 30 старших сотрудников управления, 20 национальных патентов, несколько маркетинговых компаний, 2 независимых известных бренда.

Производственная база охватывает 30000 квадратных метров с производственной лабораторией профессионального стандарта.

SOFO Group прошло сертификацию производства по международным стандартам. Наша продукция получила сертификат ISO9001 - 2008 системы менеджмента качества и процесса использования опасных веществ, подтвердило IECQ и QС080000 системы управления. Мы также получили CE, UL, CB, GS, CETL RoHS и сертификаты ПАУ, и некоторые продаваемые продукты имеют корейский сертификат EK и японский сертификат PSE. Мы имеем Российский сертификат соответствия, а сейчас работаем над получением регистрационного удостоверения соответствия ТУ Таможенного Союза.

В среде глобальной конкуренции на рынке, SOFO хочет «создать здоровую, творческую жизнь» в рамках концепции корпоративной культуры, сделать свои бренды максимально глобальными и узнаваемыми. Все наши помысла ежедневно заняты созданием того, что оценят наши покупатели и выделяют нашу продукцию в глазах общества, привнесут в неё гармонию и радость. Мы постоянно выходим за рамки привычного и бросаем вызов будущему.

SOFO - почувствуй комфорт будущего уже сегодня.

索弗名下，每一种元素都拥有一个独特的故事。



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Общие условия гарантии:

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие инструкции по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон. Во избежание проблем, просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: SF-305	СРОК ГАРАНТИИ: 6 мес.
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	ДАТА ПРОДАЖИ:
ПРОДАВЕЦ: АДРЕС: ТЕЛЕФОН: ПОДПИСЬ: МП	ПОКУПАТЕЛЬ: АДРЕС: ТЕЛЕФОН: К полученному товару претензий не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий. Все перечисленные выше гарантии действуют в случае, если письменное уведомление получено в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашений.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
7. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

1. Возврат и обмен товара ненадлежащего качества (брак)

Если при эксплуатации приобретенного товара Вы обнаружили скрытый дефект, Вы имеет право обменять его на аналогичный в или вернуть в течение 14 дней с момента покупки при условии, что:

- дефект является производственным браком
- товар использовался по назначению и согласно инструкции по эксплуатации
- имеется кассовый (и товарный) чек
- товарный вид изделия не нарушен, упаковка сохранена
- имеется гарантийный талон с печатью, отметкой о про-

даже и датой, а также заявление с описанием неисправности и контактными данными

2. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате окончания срока работы деталей;
- если имеются повреждения, причиной которых явились попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости, и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- естественный износ внешнего покрытия, чехлов из ткани, кожи, пластиковых и металлических деталей и др. материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия - не подлежат замене;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети.

3. Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- срок действия гарантии закончился;
- гарантиям не распространяется на данный вид неисправности
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.
- 4. Если для определения вида поломки нужна экспертиза и она показала, что гарантия не распространяется на такой вид неисправности, стоимость экспертизы и ремонта оплачивается покупателем.
- 5. Отказ от ответственности: производитель и дистрибьютор снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данной продукцией, домашним животным, имуществу в случаях если:
 - это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
 - срок гарантии закончился, или гарантия не распространяется на поломку, стоимость ремонта оплачивается покупателем.

По всем вопросам связанным с сервисом и гарантийный звоните по телефону **8-800-200-383-2** (звонок бесплатный из любого города России).